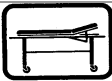


# REINIGUNGS-/ DESINFEKTIONSPLAN

## HAUTSCHUTZPLAN

| Klinik:                                                                            | HolsingVital<br>Bad Holzhausen                             |                         | Abteilung: Therapie |         |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gegenstand/Maßnahme                                                                |                                                            | Produkt                 | Konz.               | EWZ     | Häufigkeit                                                                                                                                                                                    | Ausführung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    | Hygienische Händedesinfektion                              | Skinman Soft Protect FF | gebr.-fertig        | 30 sek. | <b>•VOR:</b><br>Patientenkontakt, aseptischen Tätigkeiten<br><b>•NACH:</b><br>Kontakt mit potentiell infektiösem Material, Patientenkontakt, Kontakt mit der unmittelbaren Patienten Umgebung | Etwa 3–5 ml Desinfektionslösung, bzw. eine Menge, die in eine Hohlhand passt<br>Händedesinfektionsmittel aus dem Spender in die trockenen Hände geben und gleichmäßig bis zu den Handgelenken einreiben. Fingerzwischenräume und Nagelfalz beachten.<br><b>Gemäß TRBA 250 und RKI ist das Tragen von Schmuck an Händen und Unterarmen nicht gestattet</b><br><b>Merke:</b> · Kein Wasser zugeben!<br>· Einwirkzeit beachten! |
|    | Händewaschung                                              | Manisoft                | gebr.-fertig        | -       | bei Verschmutzung nach Toilettengang vor Pausenbeginn                                                                                                                                         | Waschlotion in die angefeuchteten Hände geben, gut mechanisch reinigen. Mit Wasser gründlich abspülen. Anschl. mit Einmal-Handtuch trocknen. Keine Stückseifen verwenden.                                                                                                                                                                                                                                                    |
|    | Hautschutz                                                 | LINDESA Professional    | gebr.-fertig        | -       | vor Dienstbeginn nach Pausen vor Feuchtarbeiten                                                                                                                                               | Gleichmäßig in die trockenen Hände einmassieren. Hautschutzpräparate nur aus Spendern oder Tuben entnehmen (keine Cremedosen).                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|    | Hautpflege                                                 | LINDESA Professional    | gebr.-fertig        | -       | nach Arbeitsende, ggf. nach Hautreinigung vor Pausen                                                                                                                                          | Gleichmäßig in die trockenen Hände einmassieren. Hautschutzpräparate nur aus Spendern oder Tuben entnehmen (keine Cremedosen).                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|    | Einmalhandschuhe                                           |                         |                     |         | <b>Anlegen:</b><br>-bei Kontakt mit potenziell infektiösen Materialien<br>-bei der Verwendung von Flächendesinfektionsmitteln usw.                                                            | - Vor dem Anlegen und <b>NACH</b> dem Ablegen der Einmalhandschuhe <b>hygienische Händedesinfektion</b> durchführen.<br>- Passende Größe auswählen<br>- Nach Benutzung entsorgen                                                                                                                                                                                                                                             |
|   | Spender                                                    | Incidin™ Pro            | 1,5 %               | 60 Min. | bei Flaschenwechsel                                                                                                                                                                           | Jeweils neue Behälter für Waschlotion und Händedesinfektionsmittel verwenden. Wischdesinfektion durchführen. Düse mit heißem Wasser durchspülen.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  | Behandlungsliege, Massageliege, Lagerungshilfsmittel       | Incidin™ Pro            | 1,5 %               | 60 Min. | Nach Patientenwechsel, nach Benutzung und bei Bedarf + Kontamination                                                                                                                          | Wischdesinfektion durchführen. Auf vollständige Benetzung achten. Nicht nachtrocknen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  | Kieselbad Naturkörner etc.                                 | Incidin™ Pro            | 1,5 %               | 60 Min. | bei Bedarf + 1 wöchentlich                                                                                                                                                                    | Austausch der Körner o.ä.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                    |                                                            |                         |                     |         | 1 x wöchentlich                                                                                                                                                                               | Entleeren der Box. Reinigung des Beckens mittels Flächendesinfektion.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  | Alkohol-empfindliche Geräte                                | Incidin Oxy Wipe        | gebr.-fertig        | 15 Min. | Nach Benutzung bei Bedarf sichtbarer Kontamination                                                                                                                                            | Alkoholfreie Desinfektion empfindlicher Oberflächen. Wischdesinfektion durchführen. Auf vollständige Benetzung achten. Nicht nachtrocknen.<br><b>Halbbarkeit nach Anbruch: 3 Monate</b>                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                    | Alkohol-unempfindliche Flächen                             | Incidin Alcohol Wipe    | gebr.-fertig        | 15 Min. | Nach Benutzung bei Bedarf sichtbarer Kontamination                                                                                                                                            | Alkoholische Desinfektion. Wischdesinfektion durchführen. Auf vollständige Benetzung achten. Nicht nachtrocknen.<br><b>Halbbarkeit nach Anbruch: 2 Monate</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                    |                                                            | Incidin™ Pro            | 1,5 %               | 60 Min. |                                                                                                                                                                                               | Wischdesinfektion durchführen. Auf vollständige Benetzung achten. Nicht nachtrocknen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  | Handtücher Decken                                          | -                       | -                   | -       | nach jeder Anwendung                                                                                                                                                                          | Die Handtücher werden patientenbezogen benutzt. Bei Bedarf und nach Entlassung erfolgt ein desinfizierendes und thermisches Waschverfahren.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|  | Nacken-, Knirolle, Kissen                                  | Incidin™ Pro            | 1,5 %               | 60 Min. | nach Kontakt mit der Haut 1 x monatlich                                                                                                                                                       | Wischdesinfektion durchführen. Auf vollständige Benetzung achten. Nicht nachtrocknen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  | Flächendesinfektion der Arbeitsflächen                     | Incidin™ Pro            | 1,5 %               | 60 Min. | Nach Kontamination täglicher Unterhaltsreinigung und bei Bedarf                                                                                                                               | Wischdesinfektion durchführen. Auf vollständige Benetzung achten. Nicht nachtrocknen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                    |                                                            | Adenovirus              | 2,0 %               | 60 Min. |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  | Vliestuchspendersysteme                                    | Incidin™ Pro            | 1,5 %               | 60 Min. | nach 28 Tagen Standzeit oder bei Bedarf                                                                                                                                                       | Aufbereitung nach Herstellerangaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|  | Berufskleidung                                             |                         |                     |         | Wechsel arbeitstäglich bei Kontamination bei Bedarf                                                                                                                                           | Maschinelle Aufbereitung; desinfizierendes/ thermisches Waschverfahren. Keine Privatkleidung (Strickjacken/ langärmelige Kleidung) über und unter der Dienstkleidung tragen. Die Kleidung darf nur zentral aufbereitet werden - nicht zuhause waschen!                                                                                                                                                                       |
|  | Gymnastik/ Hilfsmittel (Bälle, Ringe, Kegel, Schnüre u.ä.) | Incidin™ Pro            | 1,5 %               | 60 Min. | nach Kontakt mit der Haut 1 x monatlich                                                                                                                                                       | Wischdesinfektion durchführen. Auf vollständige Benetzung achten. Nicht nachtrocknen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  | Noppenmatten Igelbälle                                     | Incidin™ Pro            | 1,5 %               | 60 Min. | bei Bedarf nach Patientenkontakt + sichtbarer Kontamination                                                                                                                                   | Wischdesinfektion durchführen. Auf vollständige Benetzung achten. Nicht nachtrocknen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  | Clostridioides difficile Noroviren Rotaviren               | Incidin® Active         | 2 %                 | 30 Min. | Schlussdesinfektion bei Bedarf                                                                                                                                                                | Ansetzen mit kaltem Wasser. Angesetzte Gebrauchslösungen hat eine Standzeit von max.24 Stunden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                       |                   |         |                 |
|-----------------------|-------------------|---------|-----------------|
| erstellt durch:       | Freigabe:         | Stand:  |                 |
| © hycom GmbH & Co. KG | Hygienekommission |         | <b>Therapie</b> |
|                       | 11/2025           | 11/2025 | Seite 1 von 1   |